

Netzwerk-Installation ergoscan 24

Vorbemerkung:

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie die Software **ergoscan 24** im Netzwerk installiert wird, damit alle Daten auf einem einzigen Rechner gespeichert werden.

Stellen Sie vor der Installation sicher, daß Sie für die jeweiligen Installationslaufwerke die entsprechenden Zugriffsrechte (z.B. Win-NT: Schreiben, Lesen, Ändern; Win-95: Freigabe zum Lesen und Schreiben) besitzen.

Begriffe:

| | |
|----------------------------|---|
| Server | In dieser Installationsanleitung wird mit „Server“ derjenige Rechner bezeichnet, auf dem die Datenbank gehalten wird. |
| Arbeitsplatzrechner | In dieser Installationsanleitung wird mit „Arbeitsplatzrechner“ jeder (andere) Rechner bezeichnet, der die Datenbank des Servers benutzt. |


Vorgehen:

1. Software ergoscan 24 auf dem Server installieren.
2. Für alle Arbeitsplatzrechner die Schritte 3 bis 6 ausführen:
3. Software ergoscan 24 auf dem Arbeitsplatzrechner installieren.
Folgende Dateien vom Verzeichnis „**ergoscan24_Netzwerk**“ der Installations-CD ins Verzeichnis **C:\LAB4** kopieren:
* **Datgen.exe**, * **HWCONF4.EXE**
* **Jlabgen.dll** (bei Systemen mit Betriebssystem „Windows 2000“ erforderlich)
Verbinden Sie auf dem Arbeitsplatzrechner ein permanentes Netzlaufwerk zu dem Serverlaufwerk, daß das Verzeichnis „**lab4\db**“ enthält.

Beispiel:

Auf dem Server mit Namen „**PRAXSERV**“ ist das Verzeichnis „**lab4\db**“ auf der Festplatte mit Freigabename „**D**“ gespeichert.

Verbinden Sie auf dem Arbeitsplatzrechner ein Netzlaufwerk zur Freigabe „**\\PRAXSERV\D**“

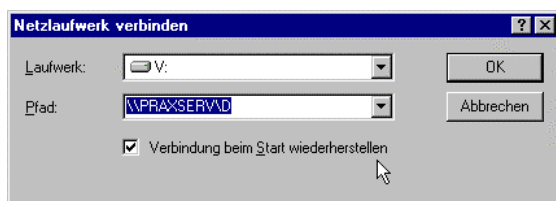

Achten Sie darauf, daß die Optionsschaltfläche „**Verbindung beim Start wiederherstellen**“ markiert ist, damit das Netzlaufwerk zukünftig beim Start von Windows automatisch eingerichtet wird.

4. Rufen Sie am Arbeitsplatzrechner das Programm **DATGEN4.EXE** (im Verzeichnis: C:\Lab4) auf.




Setzen Sie die Verzeichnisse für **MLLOCAL** und **MLTEXT** auf den lokalen Pfad setzen:

<lokales Laufwerk:>\LAB4\DB,
im Beispiel: C:\LAB4\DB.

Setzen Sie alle anderen Verzeichnisse auf den Serverpfad:

<Netzlaufwerk:>\LAB4\DB
im Beispiel: V:\LAB4\DB

5. Rufen Sie am Arbeitsplatzrechner das Programm **HWCONF4.EXE** aufrufen.

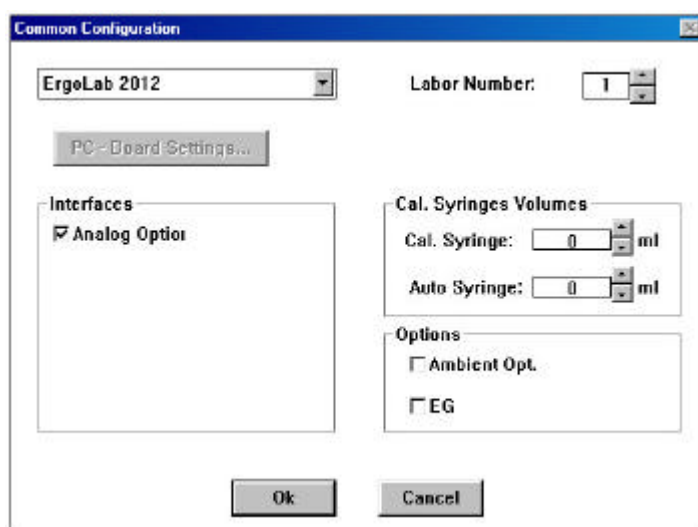

Ordnen Sie dem Arbeitsplatzrechner eine eindeutige Nummer zu:

Wählen Sie dazu im linken oberen Listenfeld „**ErgoLab 2012**“, und im Listenfeld „**Labor Number**“ rechts daneben eine eindeutige Nummer, die an **keinem anderen Arbeitsplatzrechner** vergeben ist.

Adresse für Rückfragen:

ergoline GmbH
Lindenstraße 5
D-72475 Bitz
Tel.: (07431) 98 94 - 0
Fax: (07431) 98 94 - 127
e-mail: info@ergoline.com
internet: <http://www.ergoline.com>