

Daten : Patienten & Testdaten übertragen

Hinweise:

- Laufwerksbuchstaben C:\ , D:\ sind abhängig von der speziellen Konfiguration Ihres PC-Systems.
- Ordner für Kopierdatenbank, z.B. db_transfer, als neuen Ordner im Windows-Explorer erstellen.

Ihre Konfiguration:

Quelldatenbank::\LAB4\db

Zielfdatenbank::\LAB4\db

Dateien kopieren :


Dateien

- Merge4.exe
- Jstatus.dll
- JEXTDAT4.dll

ins Verzeichnis C:\LAB4 kopieren.

a. Daten aus Quelldatenbank kopieren:

1. Programm „Merge5.exe“ bzw. „Merge4.exe“ im Verzeichnis „C:\Lab4\ „starten .
2. Paßwort „abcd“ eingeben und mit „ENTER“ bestätigen
3. Quelldatenbank überprüfen bzw. wählen C:\Lab4\db\
4. Pfad für Zielfdatenbank wählen, z.B.: C:\db_transfer
5. Beim erstmaligen Kopieren, muß zuerst eine 'leere' Datenbank angelegt werden. Bei weiteren Kopiervorgängen werden Daten in der bestehenden Datenbank ergänzt.
Menüpunkt „Datenbank anlegen“ im Fenster Ziel-Datenbank auswählen
Achtung: Pfad für Ziel-Datenbank **sorgfältig** überprüfen (bei falscher Pfadangabe, besteht die Gefahr, daß die Quelldatenbank gelöscht wird).
Es erfolgt jedoch ein **Warnhinweis** falls bereits eine Datenbank existiert.
6. Falls alle Daten übertragen werden sollen, die Felder unter „Datum berücksichtigen“ und „einzelner Patient“ leer lassen.
Falls nur die Daten eines bestimmten Zeitraums übertragen werden sollen, dann den gewünschten Zeitraum einstellen , z.B. 01.04.2001 bis 30.06.2001 (Jahreszahl 4-stellig eingeben)
7. Datentransfer „Merge“ mit „Ok“ starten.

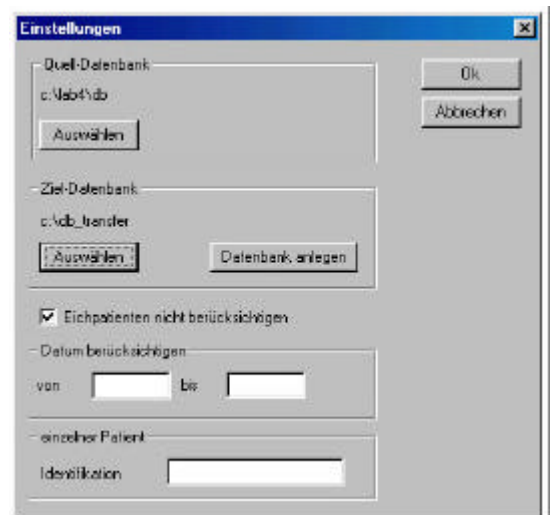

b. Daten auf Sicherungsmedium kopieren:

1. Verzeichnis „C:\db_transfer“ auf externes Medium kopieren, z.B. Diskette, CD-Rom, ZIP-Laufwerk , ...
2. Verzeichnis „C:\db_transfer“ auf Zielrechner kopieren

c. Daten auf Zielrechner in Zielfdatenbank kopieren:

1. Programm „Merge5.exe“ bzw. „Merge4.exe“ im Verzeichnis „C:\Lab4\ „starten
2. Paßwort „abcd“ eingeben und mit „ENTER“ bestätigen
3. Quelldatenbank überprüfen bzw. wählen C:\db_transfer\
4. Zielfdatenbank überprüfen bzw. wählen C:\LAB4\db\
5. Datentransfer „Merge“ mit „Ok“ starten.