

Netzwerk-Installation ergoscan 24

Vorbemerkung:

Diese Kurzanleitung beschreibt, wie die Software **ergoscan 24** im Netzwerk installiert wird, damit alle Daten auf einem einzigen Rechner gespeichert werden.

Stellen Sie vor der Installation sicher, daß Sie für die jeweiligen Installationslaufwerke die entsprechenden Zugriffsrechte (z.B. Win-NT: Schreiben, Lesen, Ändern; Win-95: Freigabe zum Lesen und Schreiben) besitzen.

Begriffe:

Server In dieser Installationsanleitung wird mit „Server“ derjenige Rechner bezeichnet, auf dem die Datenbank gehalten wird.

Arbeitsplatzrechner In dieser Installationsanleitung wird mit „Arbeitsplatzrechner“ jeder (andere) Rechner bezeichnet, der die Datenbank des Servers benutzt.

Vorgehen:

1. Software ergoscan 24 auf dem Server installieren.
2. Für alle Arbeitsplatzrechner die Schritte 3 bis 6 ausführen:
3. Software ergoscan 24 auf dem Arbeitsplatzrechner installieren.

Folgende Dateien vom Verzeichnis „**ergoscan24_Netzwerk**“ der Installations-CD ins Verzeichnis **C:\LAB4** kopieren:

* **Datgen.exe**, * **HWCONF4.EXE**


* **Jlabgen.dll** (bei Systemen mit Betriebssystem „Windows 2000“ erforderlich)

Verbinden Sie auf dem Arbeitsplatzrechner ein permanentes Netzlaufwerk zu dem Serverlaufwerk, daß das Verzeichnis „**lab4\db**“ enthält.

Beispiel:

Auf dem Server mit Namen „**PRAXSERV**“ ist das Verzeichnis „**lab4\db**“ auf der Festplatte mit Freigabename „**D**“ gespeichert.

Verbinden Sie auf dem Arbeitsplatzrechner ein Netzlaufwerk zur Freigabe „**\\PRAXSERV\D**“

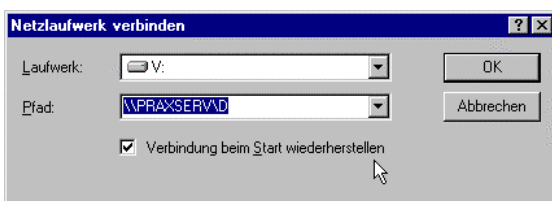

Achten Sie darauf, daß die Optionsschaltfläche „**Verbindung beim Start wiederherstellen**“ markiert ist, damit das Netzlaufwerk zukünftig beim Start von Windows automatisch eingerichtet wird.

4. Rufen Sie am Arbeitsplatzrechner das Programm **DATGEN4.EXE** (im Verzeichnis: C:\Lab4) auf.




Setzen Sie die Verzeichnisse für **MLLOCAL** und **MLTEXT** auf den lokalen Pfad setzen:

<lokales Laufwerk:>\LAB4\DB,
im Beispiel: C:\LAB4\DB.

Setzen Sie alle anderen Verzeichnisse auf den Serverpfad:

<Netzlaufwerk:>\LAB4\DB
im Beispiel: V:\LAB4\DB

5. Rufen Sie am Arbeitsplatzrechner das Programm **HWCONF4.EXE** aufrufen.

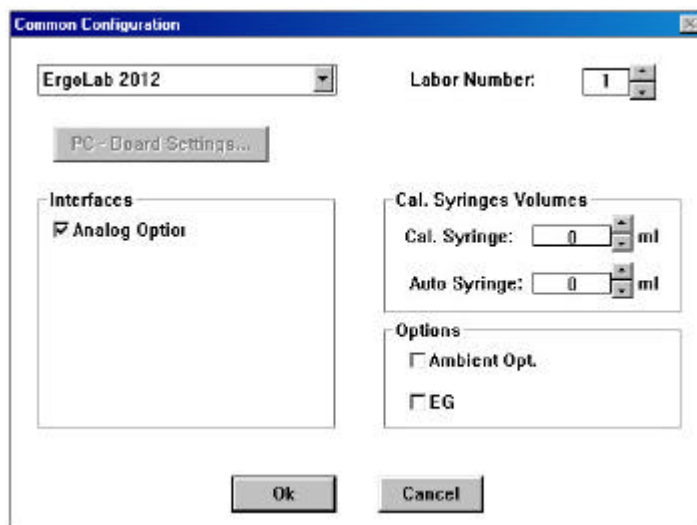

Ordnen Sie dem Arbeitsplatzrechner eine eindeutige Nummer zu:

Wählen Sie dazu im linken oberen Listenfeld „**ErgoLab 2012**“, und im Listenfeld „**Labor Number**“ rechts daneben eine eindeutige Nummer, die an **keinem anderen Arbeitsplatzrechner** vergeben ist.

Adresse für Rückfragen:

ergoline GmbH
Lindenstraße 5
D-72475 Bitz
Tel.: (07431) 98 94 - 111
Fax: (07431) 98 94 - 127
e-mail: info@ergoline.com
internet: <http://www.ergoline.com>